

1. SITUAÇÃO DE REVISÃO:

Versão	Data	Alteração
1.0	02/06/2020	02/06/2021
1.0	12/12/2021	12/12/2022
2.0	12/06/2022	12/06/2023
2.0	12/06/2023	12/06/2024
2.0	18/07/2024	18/07/2025
2.0	10/07/2025	10/07/2026
3.0	07/07/2026	07/07/2027

2. OBJETIVO:

No Laboratório Clínico, a água reagente é utilizada como reagente químico para diversas atividades de pesquisa, testes biológicos e produção de produtos médicos ou farmacêuticos e por isto a denominação água reagente onde significa que ela deve passar por processos controlados contendo uma quantidade mínima de contaminantes (íons, matéria orgânica e microrganismos e metais pesados), tendo o objetivo capaz de atender a diferentes aplicações na rotina laboratorial, seguindo aos requisitos de regulamentações para Laboratório Clínico.

3. CAMPO DE APLICAÇÃO

☒	Diretoria/ Garantia da Qualidade
☒	Área técnica
☐	Limpeza

☒	Responsável Técnico
☐	Recepção
☒	Coleta

4. REFERÊNCIA:


- 4.1. Manual de qualidade
- 4.2. PQ008 – Água Reagente
- 4.3. FR084- Controle de água reagente
- 4.4. FR002- Limpeza e manutenção de equipamento
- 4.5. FR003- Não conformidade
- 4.6. FR005- Qualificação de fornecedores
- 4.7. FR079- Ação corretiva
- 4.8. Relatório técnico de ensaio empresa terceirizada contratada.

5. TERMINOLOGIA, DEFINIÇÃO E SÍMBOLO:

- 5.1. N/A

Elaboração

Nome: Luciano Rodrigues Simões
Cargo: Gerente da Qualidade
Data: 07/07/2026

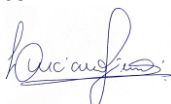

Aprovação
e
Liberação

Nome: Fernando Andrade de Souza Arêas
Cargo: Diretor
Data: 07/07/2026



6. DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS

- 6.1. Na osmose reversa é um processo pelo qual a água é forçada a passar por uma membrana semipermeável que age como um filtro molecular. A membrana remove de 90 a 99% das impurezas da água e em seguida passa por mais três filtros: Carvão ativado, Resina mista e Microbiológico. Após o seu processo final a água reagente passa pelo controle interno diário com a medição da condutividade.
- 6.2. A medição da condutividade da água reagente é feita através da utilização de um condutivímetro a medição é realizada diariamente, seguindo os seguintes procedimentos:
- Colocar 10 ml de água em um béquer;
 - Ligar o condutivímetro na rede elétrica e introduzir os pólos na água, tendo o cuidado de não tocar nas paredes;
 - Leitura da lâmpada vermelha - não acesa = água aprovada para uso – presença de baixa condutividade eletrolítica ($\leq 5 \mu\text{S/cm}$) e de alta resistividade ($\geq 1,0 \text{ M}\Omega\cdot\text{cm}$) acesa = água rejeitada. Presença de alta condutividade eletrolítica ($> 0,5 \mu\text{S/cm}$) e de baixa resistividade ($< 1,0 \text{ M}\Omega\cdot\text{cm}$).
 - O valor obtido é anotado no formulário FR004 – Controle de Água Reagente.
- 6.3. Semestralmente a água reagente passa pela análise realizada por empresa terceirizada de análise de água para os seguintes testes:
- Condutividade da água;
 - Análise de bactérias heterotróficas;
 - Coliformes totais;
 - Escherichia coli*;
 - PH;
 - Cádmio total;
 - Chumbo total
 - Cobre total;
 - Cromo total
 - Níquel total
 - Zinco total;
 - Silica total e
 - Dióxido de carbono livre.
- 6.4. A água reagente deve ser armazenada e utilizada por apenas um dia para que se evite a sua degradação e não interfira nos resultados de exames laboratoriais.

7. CONTROLE DE REGISTROS

Identificação do Registro	Responsável pelo procedimento	Responsável pelo acesso	Local do arquivamento	Forma de armazenamento	Tempo de guarda
---------------------------	-------------------------------	-------------------------	-----------------------	------------------------	-----------------

Instrução de Trabalho

Água Reagente

Código:
ITS003

Versão:
3.0

Página:
3 de 3

FR004 – Controle de Água Reagente	Supervisão e Profissionais da Área Técnica	Supervisor da Garantia da Qualidade	Arquivo ativo e Sala de Arquivo morto	SIL e papel impresso	1 ano para o arquivo ativo e 5 anos para o arquivo morto
-----------------------------------	--	-------------------------------------	---------------------------------------	----------------------	--

8. ANEXOS: